

▶ 01.注册易齐美病例系统账号

请与本公司相关工作人员联系，您将获得邀请注册的链接或二维码。



扫一扫上面的二维码图案，加我微信

联系人：梁剑彬

电话/微信同号：13418279934

▶ 02. 医生需准备的资料

①. 患者合格的外观像

外观像



正面自然像 正面微笑像 右侧90°自然像

照片具体要求，请参考易齐美
隐形矫正照片要求或拍照教程

②. 口内照片

口内像



上颌合面像 下颌合面像



右侧口内咬合像 口内正面像 左侧口内咬合像

如遇特殊病症，请增加



前牙区覆合像 前牙区覆盖像

③. X线片（曲面断层片和头颅侧位片）

X线片



曲面断层片



头颅侧位片

④. 硅橡胶印模或口扫数据 (可只选一)

硅橡胶印模



咬合关系不稳定时，需附咬合记录。

硅橡胶印模邮寄地址：广东省东莞市虎门镇白沙社区南山边二路5号B栋二楼205、206室 广东易齐美医疗科技有限公司

收件人：易齐美医疗科技

电话：138 2578 5606(微信同号)

0769-82894615

或与当地业务经理联系上门取件

口扫数据



所有品牌口扫，建议输出或转档为 STL 格式文件，直接在病例系统网站上传，入检最快。(建议)。

也可将口扫数据发至 易齐美客服邮箱：ezmservice01@163.com

关于口扫数据的要求，详见医生操作手册。

▶ 03.将准备好的患者资料上传至病例系统

a.病例系统网址：<http://59.36.188.218:8200>

b.电脑端建议使用火狐、欧朋、谷歌浏览器打开，其他浏览器可能会出现不兼容现象，影响病例上传。


或者请联系业务经理获取病例系统安装包。

c.手机端建议复制网址使用UC、QQ、火狐、欧朋、iphone手机自带的浏览器打开，微信直接打开网址会出现不兼容现象，影响病例上传。

d.为了便于方案的设计，请医生在上传资料时，按病例系统的提示，**提供患者的主诉，矫正目标、矫治计划。**

▶ 04.设计方案动画出来后，医生打开病例系统审核方案

同意方案，点击批准按钮，需要修改请点击驳回按钮，并填写修改意见。（如图例）

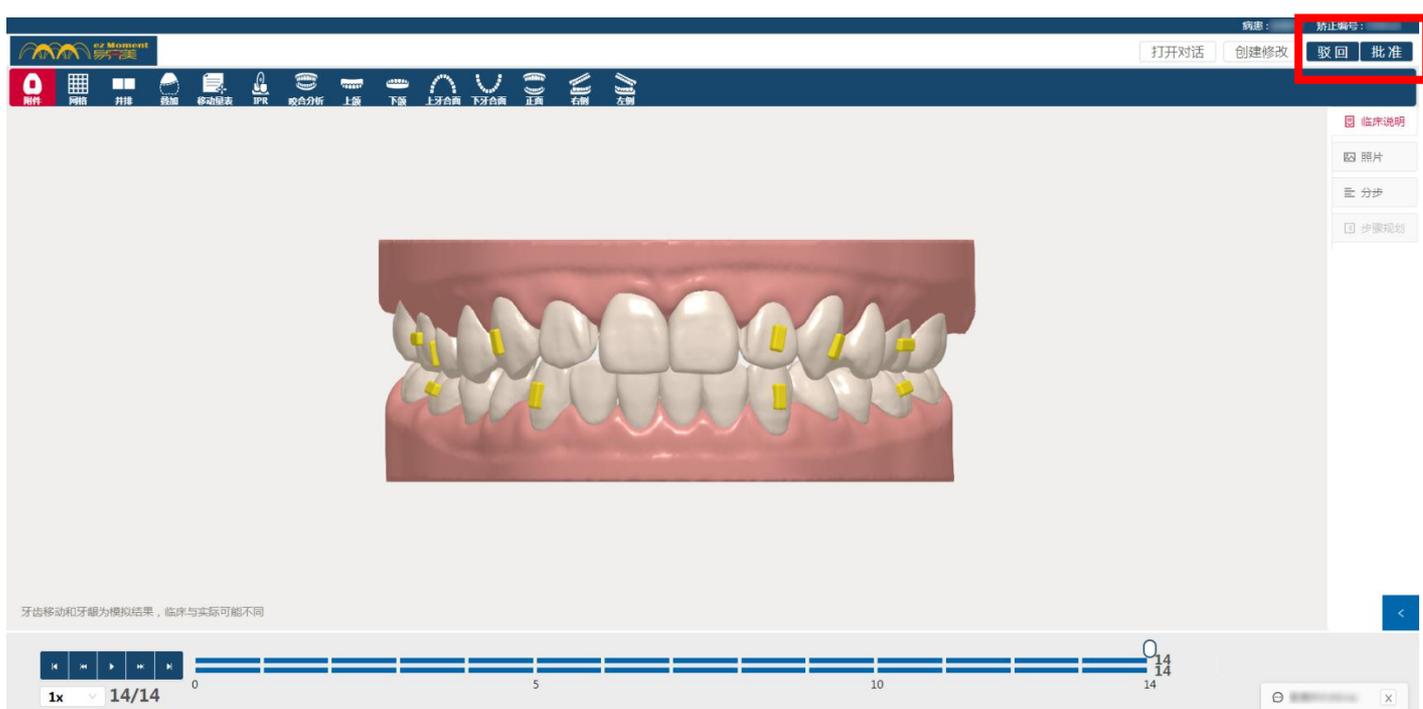

禁止编号

驳回 批准

临床说明

照片

分步

步骤规划

牙齿移动和牙根为模拟结果，临床与实际可能不同

1x 14/14

▶ 05.医生认可方案后，点击批准按钮，确认费用后，我们会安排进行生产。

▶ 06.矫治器完成生产后，附上矫治报告等一系列资料，

通过邮寄方式递送到医生处给患者进行佩戴。
